


# Pipet-Lite XLS+ Mehrkanalpipetten

## Die leichten Mehrkanalpipetten



### Leicht und komfortabel

Das ergonomische Design der leichten Pipet-Lite XLS+ Mehrkanalpipette von Rainin bietet Komfort und Leistung, selbst nach stundenlangem Pipettieren. Eine erstklassige Passform und Verarbeitung bieten Balance und Stabilität.

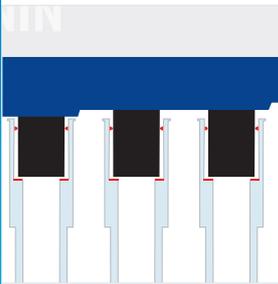

### Pipettieren ohne Kraft

Das zylindrische LiteTouch (LTS) Spitzendesign zeichnet sich durch die kleine Dichtungsfläche und den taktilen Anschlag aus. Diese Merkmale sorgen für einen perfekten Sitz der Spitzen. Mit LTS und progressiver Spitzenabwurf Funktion lassen sich die Spitzen mit geringem Kraftaufwand abwerfen.



### Bessere Kontrolle

Das neue Dichtungssystem der XLS+ Pipetten gewährleistet einen gleichmäßigen und präzisen Kolbenhub bei besonders geringem Kraftaufwand.



### Konsistenz über alle Kanäle

Das zylindrische LTS™ Spitzendesign und das neue Dichtungssystem sorgen für absolut perfekten Sitz der Spitzen und äußerst gleichmäßige und konsistente Probenaufnahme auf allen Kanälen.



## Pipet-Lite XLS+ Mehrkanalpipetten

### Unübertroffene Präzision und Leistung

Die Pipet-Lite™ XLS+™ von Rainin ist eine technisch und ergonomisch ausgereifte manuelle Mehrkanalpipette. Das patentierte LiteTouch System LTS™ gewährleistet eine hervorragende Dichtung ohne O-Ringe, einen perfekten Sitz der Spitzen und präzise und gleichmäßige Probenaufnahme über alle Kanäle. Diese robusten, aus hochwertigen Materialien gefertigten Mehrkanalpipetten wurden für eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung über Jahre hinweg konzipiert. Wie bei allen XLS-Pipetten von Rainin ermöglicht der eingebettete RFID-Chip eine lückenlose Nachverfolgung von Kalibrierungen.

# Pipet-Lite XLS+ Mehrkanalpipetten

## Die Leichtigkeit im Pipettieren

### Erweiterte Funktionalität

- 8- und 12-Kanalformat für Volumen von 1 bis 1200 µL
- LTS-System für konsistente Probenaufnahme über alle Kanäle und einfachen Spitzenabwurf
- Sicheres Aufnehmen und Abgeben der Spitzen mit geringstem Kraftaufwand
- Stets zuverlässige und leckagefreie Abdichtung
- Ergonomisches Griffdesign mit Fingerhaken
- Keine Drift dank Volumensperre
- In den Abwurf integrierter Stossdämpfer schützt den Daumen.
- RFID-Tags zur besseren Bestandsverwaltung



## Technische Daten

### Spezifikationen

Modell	Volumen (µl)	Inkrement (µl)	Genauigkeit		Präzision	
			%	µl (±)	%	µl (±)
10 µl	1,0	0,02	4	0,04	5	0,05
	5,0		1,5	0,075	1,5	0,075
	10,0		1	0,1	0,5	0,05
20 µl	2	0,02	7,5	0,15	4	0,08
	10		1,5	0,15	1,5	0,15
	20		1	0,2	0,5	0,1
50 µl	5	0,05	3,5	0,18	2	0,1
	25		1,2	0,3	0,5	0,125
	50		0,8	0,4	0,4	0,2
200 µl	20	0,2	2,5	0,5	1,2	0,24
	100		0,8	0,8	0,25	0,25
	200		0,8	1,6	0,3	0,6
300 µl	30	0,5	2,5	0,75	1,5	0,45
	150		0,8	1,2	0,3	0,45
	300		0,8	2,4	0,25	0,75
1200 µl	100	2	3,6	3,6	1	1
	600		0,8	4,8	0,3	1,8
	1200		0,8	9,6	0,2	2,4

### Bestellinformationen

MT-Bestell-Nr.	Beschreibung	Volumenbereich
8-Kanal		
17013802	L8-10XLS+	0,5 – 10 µl
17013803	L8-20XLS+	2 – 20 µl
17013804	L8-50XLS+	5 – 50 µl
17013805	L8-200XLS+	20 – 200 µl
17013806	L8-300XLS+	20 – 300 µl
17014496	L8-1200XLS+	100 – 1200 µl
12-Kanal		
17013807	L12-10XLS+	0,5 – 10 µl
17013808	L12-20XLS+	2 – 20 µl
17013809	L12-50XLS+	5 – 50 µl
17013810	L12-200XLS+	20 – 200 µl
17013811	L12-300XLS+	20 – 300 µl
17014497	L12-1200XLS+	100 – 1200 µl



### Mettler-Toledo Rainin, LLC

Technische Änderungen vorbehalten  
 © 03/2018 Mettler-Toledo Rainin, LLC  
 Gedruckt in der Schweiz 17700760 Rev J

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

Für weitere Informationen



MARKEN VON RAININ: Rainin, Pipet-Lite, XLS, XLS+, LTS, LiteTouch, Pipetting 360° und das Pipetting 360°-Logo sind Warenzeichen von Mettler-Toledo Rainin, LLC. LabX und Direct Pipette-Scan sind Warenzeichen von Mettler-Toledo Inc.